

Self-Collection with the BD Onclarity™ HPV Assay

IVD Rx Only

The FLOQSwabs® for HPV Self Collection is to be used for the collection of vaginal specimens for use with the BD Onclarity™ HPV Assay. Users should read and carefully follow instructions. If you have any questions or difficulties with the collection process described below, please contact your healthcare provider for more information. Should unexpected events not described in these instructions occur during self-collection, inform your healthcare provider.

WARNINGS: Inform your healthcare provider if you have used any substances such as vaginal creams, gels, lubricants, etc. within 24 hours prior to collection. If swab is dropped/touched in the area below the red mark, discard and request a new swab. The swab should not touch any other surface prior to inserting into vagina.


DO NOT USE: • During pregnancy or within three months after giving birth • If recently undergone gynecological surgery • In case of unusual bleeding or pelvic pain

INSTRUCTIONS:



1

Wash your hands with soap and water.

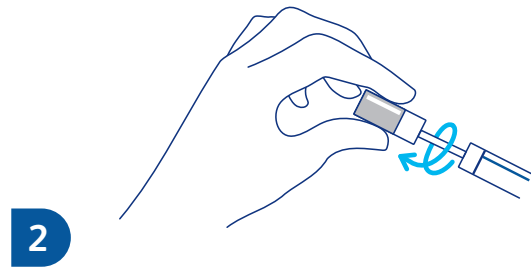

2

Twist cap to break seal. Carefully pull cap off the tube to remove the swab.




Do not touch the soft swab tip or lay the swab down. If swab is dropped or touched in the area below the **red mark**, discard and request a new swab. The swab should not touch any other surface prior to inserting into the vagina.




3

Hold swab at the **red mark** with your dominant hand (the hand that you write with).

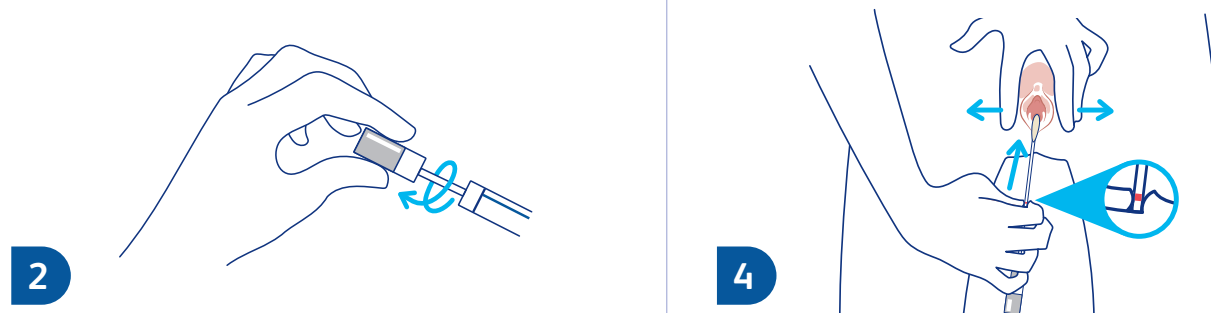


4

Standing in a comfortable position, use the free hand to spread the skin of the vaginal opening while carefully inserting the swab up to the **red mark**.

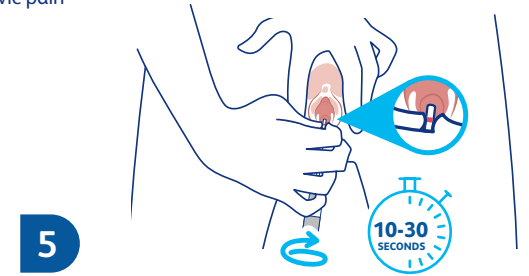


5

Gently rotate swab for 10–30 seconds and carefully withdraw the swab.

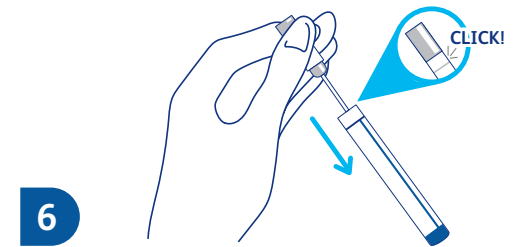

6

Place swab back into the tube and securely recap.

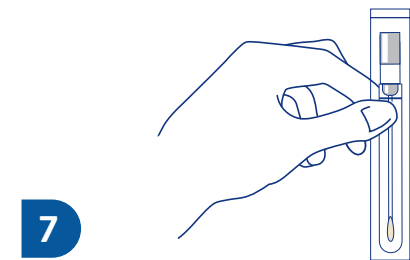

7

After collection, return the recapped swab to the healthcare provider.

Autorrecogida con el dispositivo BD Onclarity™ HPV Assay

IVD Rx Only

Los FLOQSwabs® for HPV Self Collection deben utilizarse para recoger muestras vaginales para su uso con el dispositivo BD Onclarity™ HPV Assay. Los usuarios deben leer y seguir atentamente las instrucciones. Si tiene alguna pregunta o dificultad con el proceso de recogida que se describe a continuación, comuníquese con su profesional de atención médica para obtener más información. En caso de que durante la autorrecogida ocurran eventos inesperados no descritos en estas instrucciones, informe a su proveedor de atención médica.


ADVERTENCIAS: Informe a su profesional de atención médica si ha utilizado alguna sustancia como cremas vaginales, geles, lubricantes u otros productos en las 24 horas previas a la recogida de la muestra. Si el hisopo se cae o se toca en la zona por debajo de la marca roja, deséchelo y solicite un hisopo nuevo. El hisopo no debe tocar ninguna otra superficie antes de introducirlo en la vagina.

NO USAR: • Durante el embarazo o en los tres meses posteriores al parto • Si se ha sometido recientemente a una cirugía ginecológica • En caso de sangrado inusual o dolor pélvico

INSTRUCCIONES:



Lávese las manos con agua y jabón.

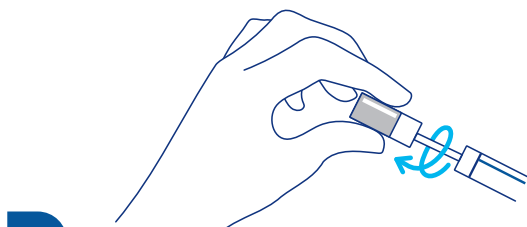


Gire la tapa para romper el precinto. Jale cuidadosamente la tapa del tubo para extraer el hisopo.


⚠ No toque la punta blanda del hisopo ni apoye el hisopo en ninguna superficie. Si el hisopo se cae o se toca en la zona por debajo de **la marca roja**, deséchelo y solicite un hisopo nuevo. El hisopo no debe tocar ninguna otra superficie antes de introducirlo en la vagina.

Becton, Dickinson and Company, 7 Loveton Circle, Sparks, Maryland 21152 USA


BD, the BD Logo and BD Onclarity are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2024 BD. All rights reserved.

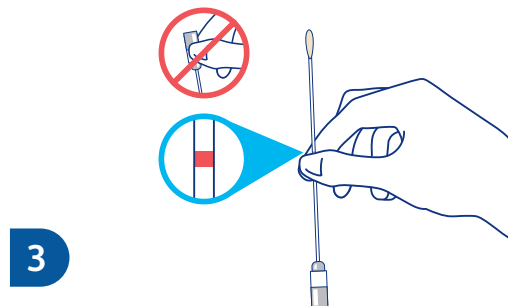


Sujete el hisopo por **la marca roja** con la mano dominante (la mano con la que escribe).

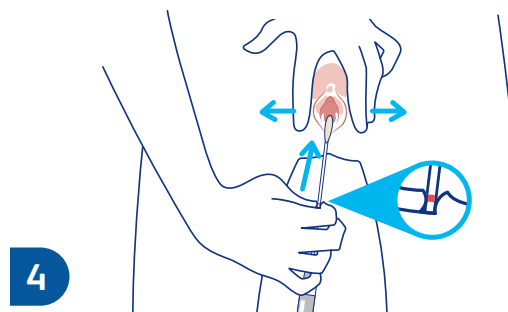


De pie en una posición cómoda, utilice la mano libre para extender la piel del orificio vaginal mientras introduce con cuidado el hisopo hasta **la marca roja**.

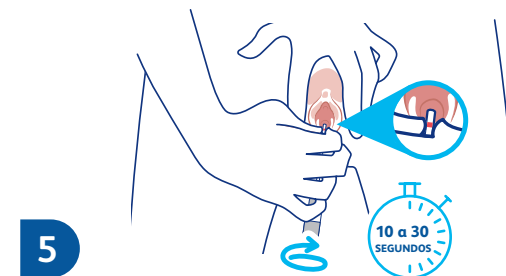

Gire suavemente el hisopo durante 10 a 30 segundos y retírelo con cuidado.

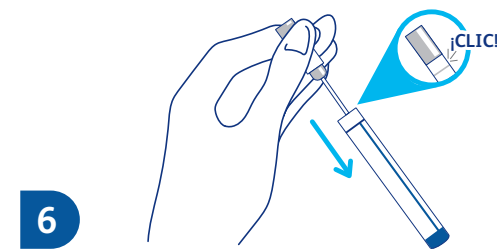

Vuelva a introducir el hisopo en el tubo y coloque la tapa con firmeza.

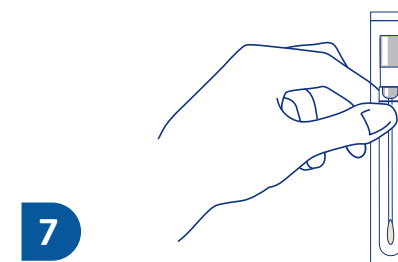

Después de la recogida, devuelva el hisopo con la tapa puesta al profesional de atención médica.

500077590(01)
2024-06
Español

